

***"Reunião de Coordenadores de Programa de DST/AIDS e de Laboratórios que realizam Exames de CD4/CD8 e de Carga Viral em Minas Gerais"***

**FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS  
Instituto Octávio Magalhães - LACEN-MG  
Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças  
Serviço de Virologia e Riquetsioses**

**Ministério da Saúde  
Coordenação Nacional de DST e AIDS  
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais  
Superintendência Operacional de Saúde  
Coordenação Estadual do Programa DST e AIDS**

***Belo Horizonte, MG - 28 de Março de 2006***


***Sônia Conceição Machado Diniz***

# Instituto Octávio Magalhães

**LACEN/MG**




Diagnóstico laboratorial  
HIV em Minas gerais  
Março de 2006

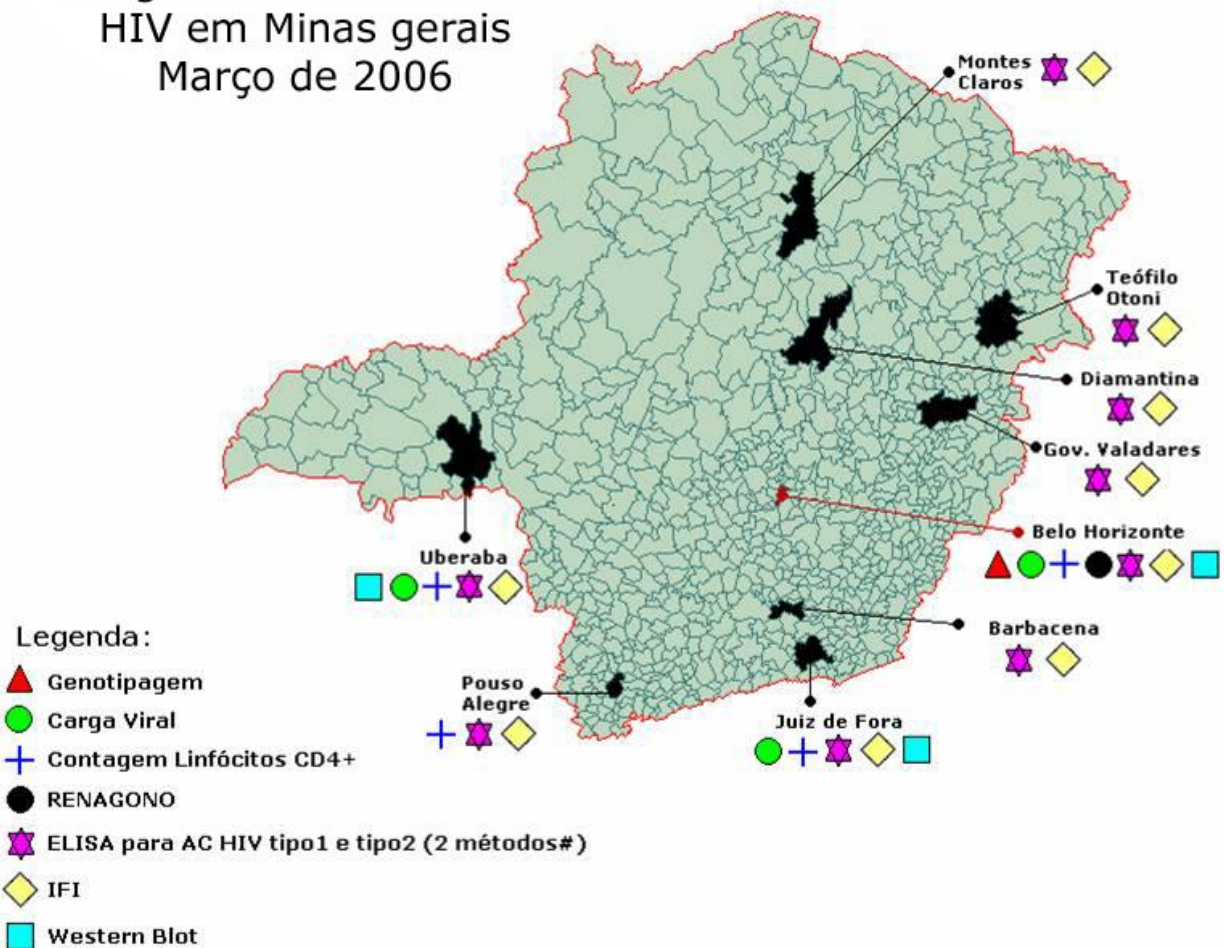

**SES - MG**

**ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA EXAMES DE CD4/CARGA VIRAL AOS LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS**

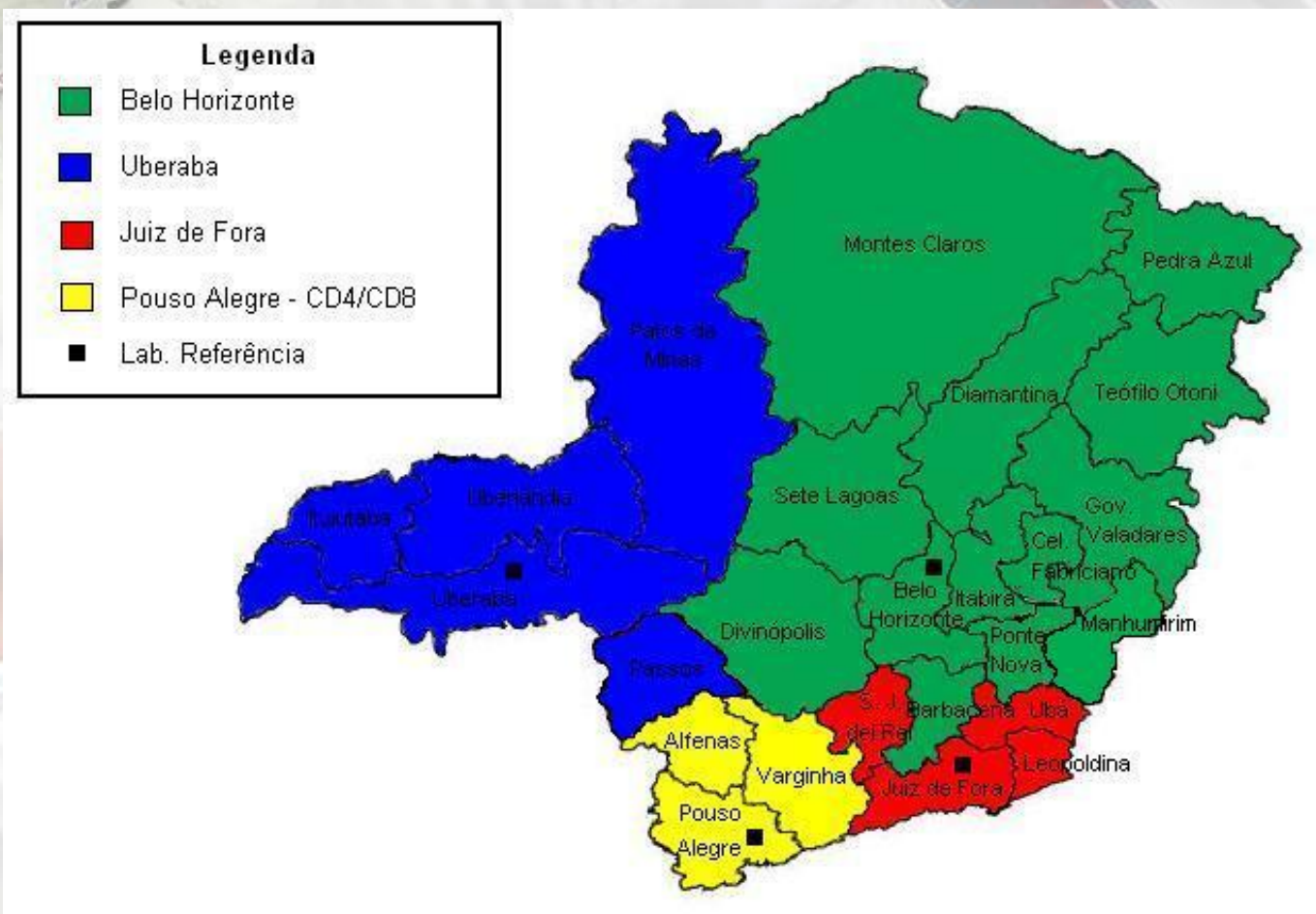

*Cota Mensal*  
**3649**  
*EXAMES*  
*Minas Gerais*

**CV**

**CD4**

**DIP/UFMG 650**  
**FUNED 1648**  
**JUIZ DE FORA 641**  
**UBERABA 710**

**DIP/UFMG 650**  
**PBH 318**  
**FUNED 1330**  
**JUIZ DE FORA 363**  
**POUSO ALEGRE 278**  
**UBERABA 710**

## **ORIENTAÇÕES GERAIS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE CARGA VIRAL E CD4/CD8**

- Coletar 5 mL de sangue total diretamente em tubos tipo vacutainer novos, contendo anticoagulante EDTA K<sub>3</sub> (tubo com tampa roxa).
- Inverter o tubo logo após a coleta e identificar o nome completo do paciente, com letra legível, diretamente no tubo, sem utilizar fita adesiva.
- Não é necessário jejum do paciente, mas o sangue deve ser colhido pela manhã e enviado em seguida.
- Nunca reutilizar tubos nem abreviar nomes dos pacientes.
- Observar e obedecer o horário estipulado para entrega do material ao laboratório.

## **TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

- Após a coleta, o sangue deve ser mantido a temperatura ambiente, entre 20° e 25°C aproximadamente.
- Sob hipótese alguma refrigerar as amostras.
- Acondicionar as amostras individualmente em saco plástico transparente, bem vedado, em uma grade própria.
- Transportar as amostras em caixa de isopor bem vedada e sem gelo, com os tubos em posição fixa e a tampa voltada para cima.
- Colar uma etiqueta que contenha o remetente e o destinatário, além da instrução: **MANTER À TEMPERATURA AMBIENTE.**
- Deverá ser enviado um tubo para Carga Viral e um para CD4/CD8, cada um deles acompanhado de um laudo médico para emissão de APAC.

## **HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS PELA FUNED**

- **Pela distância entre a GRS e a FUNED**
- **Até 100 Km – 11:00h**
- **De 100 a 200 Km – 13:00h**
- **De 200 a 300 Km – 14:00h**
- **Acima de 300 Km – 15:00h**
- **O horário máximo para recebimento das amostras é 15:00h.**
- **As amostras devem ser processadas no mesmo dia da coleta. Orientar o(s) motorista(s) a priorizar a entrega à FUNED.**



**EM CASO DE DÚVIDAS...**

***FUNED – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS***

**INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES – LACEN/MG  
DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS  
SERVIÇO DE VIROLOGIA E RIQUETSIOSES**

**LAB. CARGA VIRAL E CD4/CD8**

**TEL: (31) 3371-9401 / FAX: (31) 3371-9480**

**E-MAIL: [VIROLOGIA@FUNED.MG.GOV.BR](mailto:VIROLOGIA@FUNED.MG.GOV.BR)**

**Elaine Pereira Monteiro  
Bernardo Hinkelmann  
Leandro Dorcino**



***Obrigada!!!***